

Inkubovaná trepačka



Ecotron

Inkubovaná trepačka s možnosťou chladenia a vysokootáčkovým motorom



- **Penta-Drive**
- **Bez vibrácií**
- **Homogénna**
- **Na stole alebo pod stolom**
- **Odolná**
- **Ľahká údržba**

Kvalita za prijateľnú cenu

INFORS **HT**

- **Penta-Drive**

Trepacia doska je upevnená na 5 bodoch. Tak umožňuje silnému, ale tichému motoru preniesť plný výkon na trepané vzorky.



- **Bez vibrácií**


INFORS Dynamic Counterbalancing® je systém vyváženia, ktorý umožňuje trepať ťažkú nákladku pri vysokých otáčkach a trepanie zostáva iba v interiéri prístroja.

- **Homogénny**

Rovnomerná distribúcia teploty je takisto dôležitý faktor. INFORS HT garantuje presné rozloženie nastavenej teploty v interiéri Ecotronu.

- **Na alebo pod stolom**

Predné otváranie dverí dovoľuje Ecotron umiestniť na stôl alebo na podlahu pod ním. Nie je nutné tak zaberať pracovné miesto tam, kde ho potrebujete.

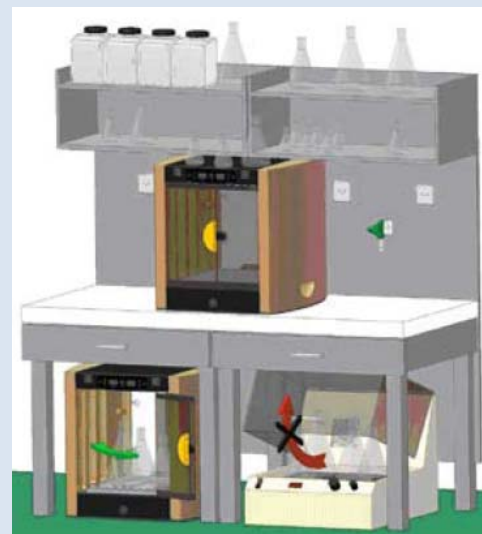

- **Odolný**

Celý model je koncipovaný tak, aby v prípade náhodného rozliatia tekutiny vo vnútri trepačky sa žiadna elektrická časť nenarušila.

Technické údaje

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Rýchlosť trepania | 30 – 550 ot./min. |
| Orbit | 25 mm |
| Presnosť trepania | 1% pri max. rýchlosti |
| Teplotné rozpätie | 5°C voči OT až 60°C |
| s chladením | až -10°C voči OT |
| Teplotná presnosť | 0.2°C v kvapaline |
| Váha bez dosky | cca 58 kg |
| Rozmery ŠxHx V | 64 x 63 x 63 cm |
| Napájanie | 230V, 50 Hz |

Kapacita

| Držiaky skúmaviek, mikrotitračný plát, ocelové svorky sa upevňujú na dosku (42x42 cm) na ktorú je možné prirobiť aj plát s adhezívnou páskou Sticky-Stuff® | Objem baniek v ml | Množstvo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| | 50 | 49 |
| | 100 | 25 |
| | 250 | 25 |
| | 500 | 16 |
| | 1000 | 9 |
| | 2000 | 4 |
| | 5000 | 2* |

* iba pri použití adhézneho páska Sticky-Stuff

